

Produktový katalog

Hydroterapie

20

LET S VÁMI

Technika pro zdravotnictví,
rehabilitaci a wellness

www.madisson.cz

› Poslání, vize a mise společnosti

Děláme život pohyblivější!

Naším posláním je přicházet s jedinečnými technologiemi navracejícími lidi k pohybu a aktivnímu životu.

Jako leader na poli dodávek zdravotnické techniky pro rehabilitaci a technologií pro wellness přicházíme s novými trendy a určujeme směr ostatním.

Každoročně rozšíříme sortiment o další novinky a významně navýšíme svůj podíl na trhu tak, abychom stále upevňovali svoji vedoucí pozici v oboru.

Mgr. Robert Vojtíšek, MBA, Executive DBA

zakladatel a ředitel společnosti / CEO



› Motto společnosti

*život
life je pohyb
is motion*



› Obsah katalogu

O společnosti	4
Programy Madisson	5



› Hydroterapie	107
Celotělové vany	108
Hydroxeury®	116
Končetinové vany	117
Zakázková výroba van	121
Nerezový zvedák, skotské stříky, galvanické lázně, saturátor	122

› O společnosti

Společnost **Madisson s.r.o.** působí v oblasti vývoje, výroby, dodávek a servisu techniky pro zdravotnictví a wellness. Byla založena v roce 1999 a od svého počátku realizovala tisíce významných projektů. V současné době patří s nejširší produktovou nabídkou na trhu mezi klíčové dodavatele výrobků a zařízení pro rehabilitaci a wellness.

Nabídka společnosti je profilována do pěti základních kategorií: **přístrojová technika, lehátka a stoly, pokročilé systémy, hydroterapie, wellness a fitness.**


Vedle své vlastní produkce, zastoupené zejména rehabilitačními a vyšetřovacími lehátky, zakázkovou výrobou nerezových van a nerezových zvedáků spolupracuje společnost Madisson s řadou světových výrobců. Řadu z nich výhradně zastupuje a nabízí rovněž odborný autorizovaný servis.

Společnost Madisson má na českém trhu tisíce referenčních pracovišť z různých oborů. Mezi naše zákazníky patří odborné rehabilitační ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných, ústavy sociální péče, domovy pro seniory a další. Významnou skupinou našich zákazníků jsou také lázeňské domy, wellness hotely a obdobná nestátní zdravotnická zařízení. V neposlední řadě společnost Madisson spolupracuje a vybavuje řadu soukromých rehabilitačních pracovišť, sportovních klubů a organizací.

Společnost Madisson má v České republice několik servisních a zákaznických pracovišť. Mezi hlavní patří obchodní a servisní centrála společnosti v Praze, obchodní a servisní pobočka pro Moravu v Boskovicích a servisní pobočka pro Karlovarský kraj v Karlových Varech. Vedle těchto firemních poboček disponuje společnost celorepublikovou servisní sítí, tak aby byl rychlý servis dosažitelný z každého regionu.

Vedle kvalitních technologií a nadstandardních služeb poskytujeme našim klientům osobní a profesionální přístup. Společnost Madisson dlouhodobě udává trend v oblasti rehabilitace a wellness. Naším cílem je vždy nabízet to nejlepší a mít radost ze spokojených a dlouhodobých klientů.

**NAVŠTIVTE NÁŠ
NOVÝ WEB
WWW.MADISSON.CZ**

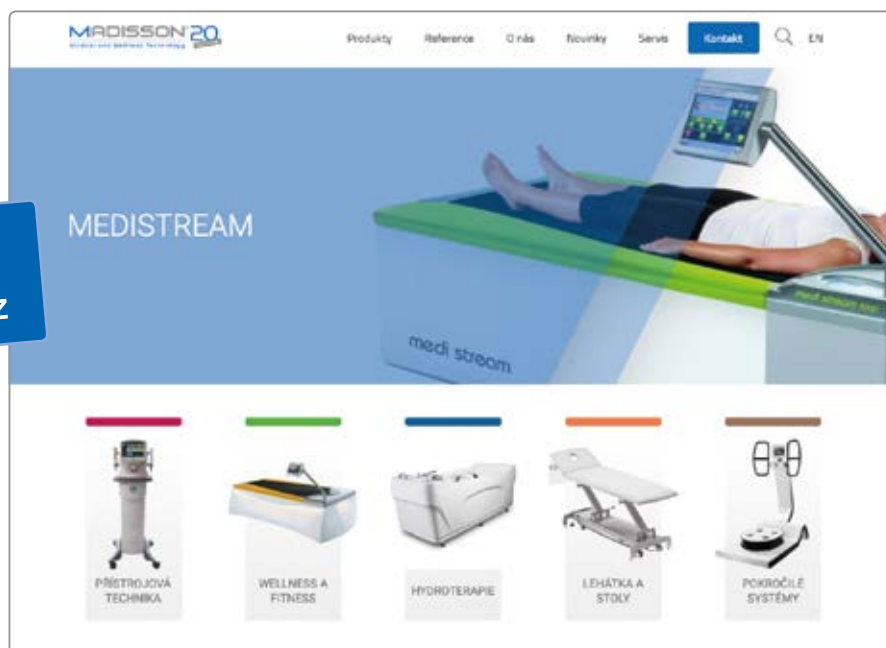

Společnost Madisson s.r.o. zastupuje, mimo jiné, tyto zahraniční společnosti:



› Programy Madisson

Best-Buy/nejlepší koupě



Konzultujte s námi každý nákup rehabilitační a wellness techniky! Naši odborníci prověří Vaše podmínky a pomohou Vám k nejlepšímu poměru výhod. Nemusíte nakoupit přes nás, ale proč nevyužít lepší podmínky splátek, proč si nenechat doporučit kvalitnější výrobek či službu? Využijte našeho vlivu v oboru!

Prodloužená záruka



10 % z kupní ceny bez DPH – prodloužení záruky o 1 rok a 20 % z kupní ceny bez DPH u záruky prodloužené o 3 roky. V případě uplatnění slevy se částka za prodlouženou záruku počítá z ceny zboží před slevou.

Doporučte nás!



Vzjede z Vašeho doporučení nákup u Madissonu? Dostanete něco pro Vás! Stačí si vybrat!

Výkup starých přístrojů



Využijte „jarní úklid“ po celý rok, za starý přístroj můžete dostat třeba i 30 000 Kč, když si od Madissonu zakoupíte nový přístroj. Nebo Vás zajímá jiný produkt? Tak se zeptejte!

Přístroj za zlomek ceny!

1/5

Líbilo by se Vám zaplatit za elektrické lehátko v hodnotě 20 000 Kč jen 4 000 Kč a měsíčně pak jen 24x 800 Kč a masírovat hned? Nebo chcete nakoupit něco jiného? Tak volejte!

VIP prezentace zdarma



Nechcete čekat na další odbornou výstavu a vidět novinky hned a u Vás? Objednejte si bezplatnou prezentaci a my Vám vše předvedeme!

Zdarma si přístroj vyzkoušejte



Líbila se Vám bezplatná prezentace a toužíte si přístroj pár dní vyzkoušet na VIP klientech či rodině? A chcete to taky zdarma? Tak si o to řekněte!

Věrnost Madissonu!



Za každý nákup od nás něco dostanete. Ptáte se co? To budete koukat! Záleží na čase a typu produktu.

On-line servis



Věděli jste, že až 80 % požadavků vyřešíme po telefonu? Jsme tu pro Vás stále, na telefonu, mailu i facebooku!

Bonus servis



No, a když to nepůjde on-line, tak přijedeme na opravu, a navíc Vám za jedny náklady na cestu můžeme provést PBTK.

Bezplatná doprava, instalace a zaškolení



Věděli jste, že Vám elektronické přístroje zdarma zavezeme a zaškolíme obsluhu?

Pojištění proti krádeži a poškození



Chraňte své investice. Informujte se u prodejce o možnostech připojištění produktu a možnosti zapůjčení náhradního stroje. Jde nám i o Vaše peníze!



Společnost Madisson s.r.o. uvádí na trh novou generaci rehabilitačních a wellnessových van.

Nejnovější generace vodoléčebných van je jedinečná nejen svým designovým zpracováním, ale zejména technickou vyspělostí, vycházející z letitých zkušeností naší výroby i výroby našich dodavatelů.

Dlouhodobě udáváme trend v oblasti hydroterapie a nabízíme jednoznačně nejširší výběr v oblasti vodoléčby. Naše vany jsou velmi oblíbené ve všech typech rehabilitačních, lázeňských i wellness zařízeních. Věříme, že oceníte zejména jejich spolehlivost, design a ergonomii.

Nabízíme celotělové rehabilitační a wellnessové vany, končetinové vany i vany vyráběné na zakázku z vysoce kvalitní nerezové oceli.

S námi máte možnost zvolit nejvhodnější variantu pro Vaše zařízení.

› Hydroterapie



*život
life je pohyb
is motion*



› Celotělové vany

VANY „AQUADELICIA I – VIII PLFK“

REHABILITAČNÍ VANY
S POSTRANNÍMI PROLISY PRO SNADNÝ
PŘÍSTUP PACIENTA I TERAPEUTA.

Celotělová vana s velkým objemem pro vířivou, perličkovou a podvodní masáž



LED displej u elektronického ovládání



Technická specifikace

- › **vířivá masáž**
- › 32 hydromasážních trysek s přivzdušením
- › **až 6 masážních zón**
- › TURBO režim vířivých trysek
- › **2 módy hydromasáže – kontinuální a pulzní s regulací přivzdušení**
- › 15 pevně nastavených masážních programů s animací pracujících zón
- › perličková masáž
- › **408 vzduchových otvorů (24 vzduchových trysek)**
- › **4 masážní zóny**
- › perličkové masáže
- › regulace intenzity perličkové masáže
- › **podvodní masáž včetně regulace a ukazatele tlaku až do 4,5 baru s přísáváním vzduchu**
- › elektronické ovládání pomocí LED displeje
- › digitální teploměr a časovač
- › možnost automatického napouštění
- › ochrana čerpadel proti chodu „nasucho“
- › přísávání vzduchu do trysek
- › proplach hydromasážního systému
- › **automatické vysoušení perličkového systému**
- › barva opláštění bílá nebo dle RAL vzorníku (za příplatek)
- › barva skeletu bílá nebo zelená, tmavě modrá, tyrkysová (za příplatek)
- › oplachová sprcha

- › vnější podsvícení opláštění (za příplatek)
- › madla
- › materiál vany – akrylát
- › trysky pro zádivou oblast rozděleny do dvou sloupců
- › skelet vany u nohou tvarovaný do třech stupňů dle výšky pacienta
- › nerezové trysky – volitelně (na dotaz)
- › rozměry (délka × šířka × výška) 2465 × 1000 × 1025 mm
- › užitečný objem vody 375 l, max. objem 475 l
- › doba napouštění/vypouštění: cca. 6 min/cca. 5 min
- › napájení 230 V nebo 400 V/50 Hz – dle typu a výbavy
- › hmotnost cca 265 kg
- › přívod teplé a studené vody 2× 1"
- › odpad vody 100 mm

>> technické informace



>> Stupně výbavy a typy van na straně 109



Aquadelicia I – VIII PLFK	I	IA	II	III	IV	V	VI	VII	VIII LFK	VIII PLFK
Hydromasáž – vířivka					ano	ano		ano	ano	ano
Počet hydromasážních trysek					10	10		10	10	10
Počet mikromasážních trysek					22	22		22	22	22
Počet zón					3	3		3	3	6
Elektronická regulace intenzity masáže								o	o	
Turbo režim – maximální intenzita						o		o	ano	ano
Přívzdušnění masáže					ano	ano		ano		ano
Kontinuální režim					ano	ano		ano	ano	ano
Pulzní režim								ano	ano	ano
Kolisavý režim								o	o	
Přednastavené masážní programy								o	o	ano / 15
Mechanický proplach masážního systému					ano	ano		ano	ano	
Elektronický proplach masážního systému					o	o		o	o	ano
Perličková masáž		ano	o	ano	o	ano	ano	o	ano	ano
Počet vzduchových otvorů		204	204	408	204	408	408	204	408	408
Počet zón		1	1	4	1	4	4	1	4	4
Regulace intenzity masáže		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Vysoušení perličkového systému							ano		ano	ano
Podvodní masáž			ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Přísadové, uhlíčitě a další koupele	ano	ano	o	o	o	o	o	o	o	o
Mechanické / pneumatické / elektronické ovládání	m	p	m/p	p	p	p	e	e	e	e
Opěrka nohou	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Vnější podsvícení opláštění		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Teploměr – analogový / digitální	a	a/d-o	a/d-o	a/d-o	a/d-o	a/d-o	d	d	d	d
Digitalní časovač							ano	ano	ano	ano
Dvoustupňový schůdek	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Automatické napouštění vody		o	o	o	o	o	o	o	o	ano
Chromoterapie		o	o	o	o	o	o	o	o	o
UV dezinfekce				o	o	o		o	o	o
Aromaterapie				o	o	o		o	o	o
Ohřev vody 3 kW				o	o	o		o	o	o

o – za příplatek
 nerezové trysky pro vířivku nebo perličkovou masáž volitelně na dotaz

VANY „AQUADELICIA MINI I–III L“

Řada celotělových anatomicky tvarovaných van pro perličkovou a vířivou masáž



**NEJPRODÁVANĚJŠÍ KOMPAKTNÍ
 CELOTĚLOVÁ VANA!**



Technická specifikace

› vířivá masáž

- › 30 hydromasážních trysek s přivzdušněním
- › možnost volby kontinuální, kolísavé nebo pulzní hydromasáže
- › možnost přivzdušnění trysek vířivé masáže s regulací vzduchu

› elektronická regulace intenzity hydromasáže

› perličková masáž

› 170 vzduchových otvorů (10 vzduchových trysek)

- › elektronické fóliové ovládání
- › LED displej s digitálním teploměrem a časovačem
- › možnost automatického napouštění
- › ochrana čerpadla proti chodu „nasucho“
- › proplach hydromasážního systému
- › automatické vysoušení perličkového systému
- › skelet vany je u nohou tvarovaný do dvou stupňů dle výšky pacienta
- › trysky pro zádovou oblast rozděleny do dvou sloupců
- › oplachová sprcha
- › madla
- › akrylátový skelet s antibakteriální úpravou, barva bílá nebo zelená, tyrkysová (za příplatek)
- › barva opláštění bílá (možno i jiná dle vzorníku RAL za příplatek)
- › hlavová opěrka
- › podvodní masáž – volitelně (na dotaz)
- › nerezové trysky – volitelně (na dotaz)

>> Stupně výbavy a typy van na straně 111



- › rozměry (délka × šířka × výška) 2195 × 800 × 875 mm
- › užitný objem 200 l, max. objem 270 l
- › doba napouštění/vypouštění: cca 4 min/3 min
- › napájení 230 V/50 Hz
- › přívod teplé a studené vody 2× 1"
- › odpad vody 50 mm/ 100mm

>> technické informace



LED displej u elektronického ovládání

	Aquadelicia Mini	Aquadelicia Mini I	Aquadelicia Mini I L	Aquadelicia Mini II	Aquadelicia Mini III	Aquadelicia Mini III	Aquadelicia Mini III L
Hydromasáž – vířivka		ano	ano			ano	ano
Počet hydromasážních trysek		30	30			30	30
Počet zón: standardně / za příplatek		1	1/2			1	1/2
Přednastavené masážní programy při 2 zónách							0
Elektronická regulace hydromasáže			0				0
Přivzdušnění masáže		ano	ano			ano	ano
Kontinuální režim		ano	ano			ano	ano
Pulzní režim			ano				ano
Kolísavý režim			0				0
Turbo režim – maximální intenzita						0	0
Mechanický proplach masážního systému		ano	ano			ano	ano
Elektronický proplach masážního systému		0	0			0	0
Perličková masáž					ano	ano	ano
Počet vzduchových otvorů					170	170	170
Počet zón					1	1	1
Regulace intenzity masáže					ano	ano	ano
Vysoušení perličkového systému							ano
Podvodní masáž		0	0	0	0	0	0
Přísadové, uhlíčné a další koupele		ano	0	0	0	0	0
Mechanické / pneumatické / elektronické ovládání		m	e	p	p	p	e
Teploměr analogový / digitální		a	d	a	a	a	d
Digitální časovač			ano				ano
Vnější podsvícení opláštění		0	0	0	0	0	0
Opěrka nohou		0	0	0	0	0	0
Schůdek		0	0	0	0	0	0
Automatické napouštění vody		0	0	0	0	0	0
Chromoterapie		0	0	0	0	0	0
UV dezinfekce		0	0	0	0	0	0
Aromaterapie		0	0	0	0	0	0
Ohřev vody 1,5 kW		0	0	0	0	0	0
Úprava pro bahenní koupele		0					

0 – za příplatek
nerozové trysky pro vířivku nebo perličkovou masáž volitelně na dotaz

VANA „ORIONMED“

Anatomicky tvarovaná automatická vana s velkým počtem trysek

Technická specifikace

- › akrylátová vana s laminátovým opláštěním
- › anatomicky tvarovaná vana pro kompletní hydroterapii – vířivka, perlička a podvodní masáž
- › **26 hydromasážních trysek rozdělených do tří nezávislých zón**
- › **126 vzduchových trysek pro perličku**
- › ochrana čerpadel proti chodu „nasucho“
- › speciální rotační hydromasážní trysky pro záda a plošky nohou
- › přívzdušnění hydromasáže
- › **dotykový displej s podsvícením**
- › nastavení času terapie s funkcí odpočítávání a zvukovým znamením na konci terapie
- › ukazatel teploty vody
- › **dohřev vody pro ideální relaxaci**
- › **ozonátor**
- › systém pro dezinfekci a odstraňování usazenin
- › 3 standardní programy
- › automatické napouštění vany
- › barva opláštění bílá

- › barva skeletu bílá nebo zelená
- › hlavová opěrka
- › hladinové čidlo
- › rozměry (délka × šířka × výška) 2140 × 850 × 850 mm
- › užitečný objem vody 160–280 l
- › napájení 230 V/50 Hz
- › hmotnost bez vody 170 kg
- › přívod teplé a studené vody 2× 1"
- › odpad vody 70 mm

Doplňkové vybavení

- › podvodní masáž s nezávislým čerpadlem včetně regulace a ukazatele tlaku
- › chromoterapie – multi-led lampy pro nadstandardní terapii
- › aromaterapie
- › audio systém – možnost externího připojení mp3, Hi-Fi apod.
- › opěrka pro nohy



VANA „AQUAMEDEN“

Vana pro podvodní masáž s velkým objemem s možností vířivé masáže

Technická specifikace

- › **podvodní masáž včetně regulace a ukazatele tlaku až do 4,5 baru**
- › digitální časovač terapie
- › hladinové čidlo
- › ukazatel teploty vody
- › **ochrana čerpadel proti chodu „nasucho“**
- › akrylátový skelet
- › barva skeletu bílá nebo zelená
- › oplachová sprcha
- › **madla pro pohodlné provádění podvodní masáže**
- › rozměry (d × š × v) 2350 × 1000 × 960 mm
- › minimální/maximální objem vody 250 l/550 l
- › doba napouštění cca 6 min
- › doba vypouštění cca 4,5 min
- › napájení 230 V/50 Hz
- › přívod teplé a studené vody 2 × 1"
- › odpad vody 50 mm

**NEJOBJEMNĚJŠÍ VANA
PRO PODVODNÍ MASÁŽ
NA TRHU – AŽ 550 LITRŮ**

Doplňkové vybavení

- › **vířivá masáž: 8 hydromasážních nastavitelných trysek umístěných dle ergonomie pacienta + 3 trysky pro zádovou oblast**
- › možnost přivzdušnění trysek vířivé masáže s regulací vzduchu
- › automatický dezinfekční program hydromasážního systému
- › chromoterapie
- › audio systém – možnost externího připojení mp3, Hi-Fi apod.



VANA „BALMED“

Vana s moderním designem pro přísadové a uhlíkové koupele

Technická specifikace

- › **moderní zdravotnická vana určená pro CO₂ slané nebo siřičité koupele**
- › **2 trysky pro napouštění**
- › sprchová baterie
- › chromované vnější obložení
- › akrylátový skelet se zvýšenou odolností vůči teplotám a minerálním vodám
- › barva skeletu bílá nebo zelená

varianta Eco/Standard:

- › rozměry (d × š × v) 1950 × 750 × 760 mm
- › min. objem vody 140 l/150 l
- › max. objem vody 240 l/300 l
- › doba napouštění cca 3 min/3,5 min
- › doba vypouštění cca 5 min/5 min
- › napájení 230 V/50 Hz (s výbavou AIR 64 perlička)
- › přívod teplé a studené vody 2 × ¾"
- › odpad vody 100 mm



Doplňkové vybavení

- › AIR 64 perlička – 64 vzduchových trysek, systém ohřevu vzduchu, nezávislé vzduchové čerpadlo
- › chromoterapie



VANA „AQUADELICIA IX“

Moderní vana ideální pro wellness



Technická specifikace

- › **50 hydromasážních trysek**
- › regulace intenzity hydromasáže
- › **2 zóny hydromasáže**
- › přísávání vzduchu do hydromasážních trysek s regulací
- › režim hydromasáže: kontinuální, pulzní, kolísavý
- › mechanický proplach hydromasážního systému
- › **perličková masáž – 204 vzduchových otvorů**
- › automatické vysoušení perličkového systému
- › elektronické ovládání
- › termostatická baterie
- › **automatické napouštění**
- › elektronický teploměr
- › časovač 1–30 min
- › systém pro udržování teploty vody ve vaně
- › oplachová sprcha
- › směrově nastavitelná tryska TurboJet pro oblast hrudníku
- › **chromoterapie – podsvícení vodní hladiny (30 bodových světél)**
- › elektronické fóliové ovládání na vertikálním stojanu
- › vnější podsvícení
- › **aromaterapie**
- › UV dezinfekce
- › ochrana čerpadel proti chodu „nasucho“
- › **odnímatelná hadice s rychlospojkou pro podvodní masáž**
(volitelně, nelze v kombinaci s tryskou TurboJET)

- › akrylátový skelet
- › barva skeletu: bílá
- › barva opláštění: výběr ze 720 barev
- › rozměry (délka × šířka × výška) 2155 × 980 × 980 mm
- › užitečný objem vody 305 l
- › napájení 230 V nebo 400 V (dle zvolené výbavy)



VANA „AQUANEA“

Jedná se o luxusní anatomicky tvarovanou vanu s jedinečným designem a výbavou zajišťující maximální komfort. Disponuje nejen velkým počtem hydromasážních a vzduchových trysek pro nadstandardní masáž, ale i dalšími moderními systémy usnadňujícími její provoz a údržbu. Vana je vhodná pro hotelové a wellness provozy.

Technická specifikace

- › celotělová anatomicky tvarovaná vana pro vířivou a perličkovou masáž
- › **188 hydromasážních trysek**
- › **62 vzduchových trysek pro perličkovou masáž**
- › možnost regulace výkonu perličky
- › ozonátor
- › středový masážní panel pro masáž vnitřních stran lýtek a stehen
- › hladinové čidlo
- › automatický proplach a vysoušení
- › **automatické napouštění s termostatem**
- › automatické vypouštění
- › ochrana čerpadla proti běhu „nasucho“
- › **elektronicky řízený systém dezinfekce a odstraňování usazenin**
- › multifunkční elektronický ovládací panel
- › časovací jednotka – elektronické ovládání a zobrazování informací na LCD displeji
- › **2 teplotní čidla (aktivovaná při napouštění vany a během procedury)**
- › systém pro udržování teploty vody v průběhu relaxace
- › oplachová sprcha
- › hlavová opěrka
- › madla
- › barevné provedení: bílá nebo zelená
- › užitný objem max. 250 l
- › rozměry (délka × šířka × výška) 2430 × 1150 × 850 mm
- › napájení 400 V/50 Hz



Doplňkové vybavení

- › **9 nezávislých zón vířivky, 5 standardních programů, 3 uživatelské programy**
- › chromoterapie (2 nebo 4 lampy)
- › chromoterapie (12, 24 nebo 36 nezávislých světel)
- › audio vstup
- › aromaterapie



› Hydroxeury[®]

JEDINÉ ORIGINALNÍ
 HYDROXEURY[®] NA TRHU!

FLORIDA 100

Technická specifikace

- › celotělová vířivá lázeň
- › **144 trysek anatomicky rozmístěných dle ergonomie uživatele**
- › 5 samostatně programovatelných zón
- › každá zóna lze individuálně zapnout i vypnout
- › systém mísení vody se vzduchem v 10 tryskových komorách
- › 6 přednastavených programů
- › individuální nastavení času pro každou z pěti zón
- › **systém ochrany proti opaření**
- › regulační ventil pro přísávání ohřívajícího vzduchu
- › automatické napouštění i vypouštění
- › výkon čerpadla 400 l/min
- › integrovaný dezinfekční program
- › oplachová sprcha, madla
- › užitečný objem 220 l
- › rozměry (délka × šířka × výška) 2160 × 900 × 810 mm



Volitelné příslušenství

- › hadice pro podvodní masáž, systém pro masáž břišních partií (pouze v kombinaci s podvodní masáží), 28 přidavných hydromasážních trysek, 146 přidavných hydromasážních trysek, automatický proplach hydromasážního systému, chromoterapie, reproduktory

ATLANTIS 500

Technická specifikace

- › celotělová vířivá lázeň
- › **172 trysek anatomicky rozmístěných dle ergonomie uživatele**
- › 8 samostatně programovatelných zón
- › každá zóna lze individuálně zapnout i vypnout
- › systém mísení vody se vzduchem v 16 tryskových komorách
- › 16 přednastavených programů
- › individuální nastavení času pro každou z osmi zón
- › **systém ochrany proti opaření**
- › regulační ventil pro přísávání ohřívajícího vzduchu
- › automatické napouštění i vypouštění
- › výkon čerpadla 850 l/min
- › integrovaný dezinfekční program
- › oplachová sprcha, madla
- › užitečný objem 220 l
- › rozměry (délka × šířka × výška) 2300 × 900 × 860 mm



Volitelné příslušenství

- › hadice pro podvodní masáž, systém pro masáž břišních partií (pouze v kombinaci s podvodní masáží), 58 přidavných hydromasážních trysek, automatický proplach hydromasážního systému, chromoterapie, reproduktory, vestavěný dezinfekční systém



Vnější podsvícení a chromoterapie

› Končetinové vany

Vana pro masáž horních končetin „AQUAMANUS“

Technická specifikace

- › **10 hydromasážních trysek s přivzdušněním**
- › regulace výkonu hydromasáže
- › digitální ukazatel napouštěné vody a vody ve vaně
- › elektronické ovládání s časovačem
- › elektronický proplach hydromasážního systému (volitelně)
- › **směšovací baterie**
- › funkce kolísání intenzity masáže
- › **možnost volby kontinuální nebo kolísavé masáže**
- › akrylátový skelet
- › oplachová sprcha
- › možnost volby barvy opláštění (za příplatek)
- › nerezové trysky (za příplatek)



LED displej u elektronického ovládání

- › užitný objem 25 l
- › rozměry (d × š × v) 1010 × 700 × 1000 mm
- › napájení 230 V/50 Hz, 0,7 kW
- › přívod teplé a studené vody 1/2"
- › odpad 50 mm

>> technické informace



Vana pro masáž horních končetin „WKG“

Technická specifikace

- › **44 hydromasážních trysek s přivzdušněním**
- › regulace výkonu hydromasáže
- › **elektronické ovládání s časovačem**
- › digitální teploměr
- › barva skeletu bílá nebo zelená
- › oplachová sprcha
- › akrylátové provedení
- › senzor hladiny vody
- › **automatické napouštění (volitelně)**
- › rozměry (d × š × v) 980 × 900 × 920 mm
- › napájení 230 V/50 Hz, 0,9 kW
- › přívod teplé a studené vody 2 × 3/4"
- › odpad 50 mm



Vana pro masáž dolních končetin „AQUAPEDIS“

Technická specifikace

- › 16 hydromasážních trysek s přivzdušením a regulací intenzity hydromasáže
- › kontinuální i pulzní režim masáže
- › 68 vzduchových otvorů pro perličkovou masáž s regulací intenzity
- › automatické vysoušení perličkového systému
- › digitální teploměr a časovač
- › elektronické ovládání s časovačem
- › oplachová sprcha
- › akrylátový skelet, laminátové opláštění
- › možnost volby barvy opláštění
- › ochrana proti chodu „nasucho“
- › automatické napouštění (volitelně)
- › rozměry (d × š × v) 920 × 920 × 660 mm
- › napájení 230 V/50 Hz
- › užitný objem 69 l
- › přívod teplé a studené vody 1/2"
- › odpad 50 mm

Vanu Aquapedis lze dle požadavku dodat bez perličkové masáže – specifikace na dotaz



LED displej u elektronického ovládání



Vana pro masáž dolních končetin „WKS“

Technická specifikace

- › 38 hydromasážních trysek
- › regulace výkonu hydromasáže
- › elektronické ovládání s časovačem
- › oplachová sprcha
- › akrylátové provedení
- › hladinové čidlo
- › automatické napouštění (volitelně)

- › užitný objem 40 l
- › rozměry (d × š × v) 980 × 900 × 620 mm
- › napájení 230 V/50 Hz
- › přívod teplé a studené vody 2 × 3/4"
- › odpad 50 mm

Vana pro masáž dolních končetin „WKD“

Technická specifikace

- › aplikace v sedě nebo ve stoje
- › 6 hydromasážních trysek s přivzdušením
- › regulace výkonu hydromasáže
- › elektronické ovládání s časovačem
- › oplachová sprcha
- › hladinové čidlo
- › automatické napouštění

- › užitný objem 120 l
- › rozměry (d × š × v) 1180 × 620 × 810 mm
- › napájení 230 V / 50 Hz
- › přívod teplé a studené vody 2 × 3/4"
- › odpad 50 mm



Vana pro masáž dolních končetin, beder a kyčlí v sedě „AQUAPEDIS I.“

Technická specifikace

- › **29 hydromasážních trysek rozdělených dle částí těla (chodidla, kotníky, kolena, kyčle, bedra)**
- › 2 zóny hydromasáže + 1 zóna (tryska) na masáž hemoroidů
- › přivzdušnění hydromasáže
- › regulace intenzity hydromasáže (volitelně)
- › **kontinuální, pulzní a kolísavý režim vířivé masáže**
- › **možnost perličkové masáže – 68 vzduchových otvorů**
- › automatické vysoušení perličkového systému
- › elektronické nebo pneumatické ovládání
- › **akrylátový skelet s antibakteriální úpravou**
- › automatické napouštění (volitelně)
- › **vnější podsvícení panelů (volitelně)**
- › chromoterapie (volitelně)
- › nerezové trysky – volitelně
- › Aquapedis I, rozměry (d × š × v) 1500 × 700 × 950 mm
- › Aquapedis II, rozměry (d × š × v) 1550 × 770 × 1050 mm
- › užitný objem 120 l / max. objem 170 l
- › napájení 230 V / 50 Hz



NEJPRODÁVANĚJŠÍ MODEL
SEDACÍ VÍŘIVKY!



JEDINÁ SEDACÍ VÍŘIVKA
S TRYSKAMI NA CHODIDLA

Vana pro masáž dolních končetin v sedě „WKR“

Technická specifikace

- › 2-zónová sedací vana
- › **12 trysek (6 na nohy, 6 na oblast zad)**
- › regulace výkonu, digitální teploměr
- › **elektronické ovládání s časovačem**
- › **elektronicky řízený systém odstraňování usazenin**
- › oplachová sprcha
- › hladinové čidlo
- › **automatické napouštění**
- › objem 75/210 l
- › rozměry (d × š × v) 1165 × 680 × 952 mm
- › napájení 230 V / 50 Hz



SKVĚLÝ POMĚR
CĚNA/VÝKON!



4-komorová končetinová vana pro horní a dolní končetiny „AQUAPEDIS II“



Technická specifikace

- › **16 hydromasážních nerezových mikrotrysek ve vaničce na dolní končetiny**
- › přivzdušnění hydromasáže
- › kontinuální i pulzní režim hydromasáže
- › kolísavý režim intenzity hydromasáže (volitelně)
- › mechanický proplach hydromasážního systému
- › možnost elektronické regulace intenzity vířivé masáže
- › ochrana proti chodu „nasucho“
- › **3-zónová perličková masáž**
- › 8 nerezových trysek pro perličkovou masáž ve vaničce na dolní končetiny
- › **2x 12 vzduchových trysek pro perličkovou masáž ve vaničkách na horní končetiny**
- › automatické vysoušení perličkového systému
- › digitální teploměr a časovač
- › směšovací ventil
- › **elektronické ovládání**
- › oplachová sprcha
- › barva bílá (volitelná za příplatek)
- › rozměry (d x š x v) 1605 x 1285 x 980 mm
- › napájení 230 V/50 Hz
- › užitný objem celkově 70 l
- › přívod teplé a studené vody 3/4"
- › odpad 50 mm



Vanu Aquapedis II lze dodat pro bahenní nebo minerální lázeň (bez vířivky a perličky)

UNIKÁTNÍ KOMBINOVANÁ VANA PRO HORNÍ I DOLNÍ KONČETINY

Hydroterapie



› Zakázková výroba van

NEREZOVÁ VANA PRO PŘÍSADOVÉ KOUPELE

- › vana použitelná pro CO₂, minerální, rašelinové, konopné, pivní koupele atd.
- › zakázková výroba
- › vana je vyrobena z vysoce kvalitní leštěné nerezové oceli
- › možnost obložení nebo samostatně stojící
- › oplachová sprcha
- › postranní madla, zarážka na nohy (volitelně)
- › rozměry vany s ovládacím pultem (d × š) 2117 × 852 mm
- › možnost 2-plášťové vany pro ohřev párou (na dotaz)



CELOTĚLOVÁ NERAZOVÁ VANA S DVÍŘKY PRO PŘÍSADOVÉ KOUPELE

Technická specifikace

- › tvar a rozměr lze upravit dle přání zákazníka
- › vana určená pro imobilní pacienty a vozíčkáře
- › materiál: leštěná nerez nejvyšší kvality pro snadnější údržbu při používání minerálních nebo slatiných koupelí
- › nízký vstupní práh
- › opláštění vany standardně bílé (na přání lze upravit)
- › nerezový rám vany
- › oplachová sprcha
- › postranní madla
- › rozměry (d × š × v) 2035 × 841 × 950 mm
- › přívod teplé a studené vody 2 × 1"
- › odpad vody 50 mm



› Nerezový zvedák, skotské stříky, galvanické lázně, saturátor

VANOVÝ ZVEDÁK PRO IMOBILNÍ PACIENTY

- › nerezové provedení
- › elektrický zdvih
- › provoz na akumulátor
- › unikátní komfort pro pacienta i terapeuta
- › nosnost 130 kg
- › pevné ukotvení do podlahy
- › zdvih 600 mm
- › podstavec z kvalitní nerezové oceli



„AQUAMOBIL“

- › mobilní zařízení pro podvodní masáž
- › kontrola tlaku podvodní masáže (0–4 bar)
- › teploměr
- › 3 vyměnitelné koncovky na podvodní masáž
- › zabudovaný dezinfekční systém
- › 4 kolečka s brzdou
- › rozměry (d × š × v)
420 × 640 × 950 mm

Z JAKÉKOLI VANY UDĚLÁTE VANU S PODVODKOU!



vyměnitelné koncovky



SATURÁTOR

- › zařízení pro směšování vody s plynem CO₂
- › možnost napojení až 5 van
- › CO₂ redukční stanice včetně redukčního ventilu pro dva zásobníky
- › rozměry (š × v) 324 × 1870 mm
- › množství saturované vody 50 l/min
- › napájení 230 V, 50 Hz
- › přívod studené vody a výstup saturované vody ¾"



ČTYŘKOMOROVÁ GALVANICKÁ LÁZEŇ GI-VZ

- › řádkový LED displej pro zobrazení proudu a napětí
- › individuální výběr polarity elektrod a druhu terapie
- › 4 pulzní proudy: monofáze; pravoúhlý proud 140 Hz; 2 pravoúhlé proudy: 50 Hz s 0,5 Hz nebo 2 Hz se sinusovou modulací
- › oplachová sprcha



CELOTĚLOVÁ GALVANICKÁ LÁZEŇ S PODVODNÍ MASÁŽÍ „UW GI 1800 AC“

- › **kombinovaná vana pro aplikaci podvodní masáže a elektrogalvanické lázně**
- › **podvodní masáž: 0–5 barů**
- › různé typy koncovek pro podvodní masáž
- › ochrana proti běhu „nasucho“
- › 8 masážních mikrotrysek (volitelně)
- › 4 pulzní proudy: monofáze; pravoúhlý proud 2 pravoúhlé proudy: 50 Hz s 0,5 Hz nebo 2 Hz se sinusovou modulací
- › **membránová klávesnice**
- › oplachová sprcha
- › rozměry (d × š × v) 2320 × 940 × 900 mm
- › objem 600 l
- › materiál akrylát
- › napětí 230 V/50 Hz



KATEDROVÉ SKOTSKÉ STŘIKY „AQUABELA“

- › **dvoupistolové provedení masážních trysek**
- › regulace výkonu masážních trysek
- › ukazatel teploty a tlaku vody
- › možnost ovládní každé trysky samostatně
- › **usměrňovač a rozprašovač proudu vody**
- › nastavitelná opěrka pro ruce obsluhy
- › bodový i vějířovitý proud vody
- › možnost otáčení o 90°

Pro kompletní nabídku skotských stříků nás prosím kontaktujte



SCHŮDKY K VANÁM



schůdek dvoustupňový laminátový



schůdek dvoustupňový laminátový s nerez zábradlím



schůdek jednostupňový laminátový



Jsme tradiční česká společnost,
která je tu pro Vás v oblasti
vývoje, výroby, prodeje,
poradenství a servisu
zdravotnické a wellness techniky.

Jsme držitelé **certifikátu
ISO:13485:2012**, jako osvědčení
o systému zajišťování kvality
v organizaci.

Fotografie v katalogu jsou ilustrační.

MADISSON®

Medical and Wellness Technology

Madisson s. r. o., Soumarská 8, 104 00 Praha 10
tel.: +420 271 743 154, fax: +420 271 743 010
gsm: +420 777 180 412, e-mail: info@madisson.cz

www.madisson.cz

www.madissonshop.cz
(kompletní nabídka spotřebního materiálu)

*život
life je pohyb
is motion*